

**Brugsanvisning**

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug. Gem brugsanvisningen, du kan få brug for at læse den igen.

**FJERNER VORTER EFFEKTIVT****1. INDLEDNING**

Vortefri FREEZE er en hurtig hjemmebehandling, som effektivt fjerner vorter på hænder, arme og fødder. Dette er den første hjemmebehandling med dinitrogenoxid, en meget kold gas. Ved hjælp af Ultra Freeze Technology™ fryses vorten ved -80°C og kulden når de dybeste lag af vorten.

Vortefri FREEZE har en meget lav starttemperatur (-80°C), som holder under anvendelsen. Vortefri FREEZE er langt den koldeste frysebehandling til hjemmebrug. Dette er vist i en in-vitro temperaturtest med forskellige fryseprodukter til hjemmebehandling. Vortefri FREEZE er derfor mere effektiv.

Vortefri FREEZE er et højteknologisk udstyr, som er hurtigt og nemt at anvende. Behandlingen kan anvendes til voksne og børn over 4 år.

**2. HVAD DU BØR VIDE FØR OG EFTER BEHANDLING****Anvend ikke Vortefri FREEZE**

- til børn under 4 år
- på ansigt, lyske, kønsdele, hovedbund og slimhinder
- på rask hud (hud uden vorter)
- på vorter, der findes på følsom hud og vær ekstra forsigtig ved behandling på områder med tynd hud
- hvis vorten og/eller huden omkring bløder eller er åben, er irriteret, kløende, betændt eller rød.
- hvis du er usikker på om væksten er en almindelig vorte. Spørg en læge.
- på skønhedspletter, ligtorne, vabler eller andre hudskader, eller noget, der kan være hudkræft (melanoma)
- på væskefyldte blærer på huden (kaldet molluscum contagiosum / mollusker eller vandvorter) eller andre blærer og blister
- hvis du er gravid eller ammer
- til personer med diabetes og/eller som har problemer med blodcirkulationen eller blodpropper
- på flere vorter samtidig, hvis vorterne findes tæt sammen. Vent 14 dage før du behandler den næste vorte.

**Forsigtighedsregler**

- Må ikke indåndes. Kun til udvortes brug. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Påfør ikke i længere tid end 15 sekunder på hænder og arme, eller 40 sekunder på fødder. Overdreven eller ukorrekt brug kan medføre smerte og hud- og nerveskader.
- Vortefri FREEZE bør håndteres af en voksen, når et barn skal behandles for vorter.
- Dinitrogenoxid er en ugiftig, ikke-brandbar gas, men den kan medvirke til antændelse i tilfælde af brand. Holdes væk fra flammer og letantændelige materialer. Ryg ikke og anvend ikke produktet i nærheden af åben ild.
- Må ikke brændes eller punkteres, heller ikke efter brug. Beholderen er under højt tryk og kan ikke åbnes.

**For det bedste resultat med fodvorter**

Hård hud oven på vorten gør frysningen vanskeligere. For det bedste resultat med fodvorter:



- Sæt området med vorten i blød i lunken vand indtil huden er blød.
- Fjern forsigtigt overliggende hud på indadgående fodvorter med f.eks. en lille fodfil.
- Sørg for at vorten og huden omkring er helt tør før behandlingen.
- Du må ikke file på selve vorterne. Vorterne kan blive ømme, og der kommer ny hård hud på vorterne.

**Efter brug af Vortefri FREEZE**

Brug af Vortefri FREEZE kan give en prikkende følelse og huden kan blive øm. Disse virkninger bør forsvinde efter nogle få timer. Umiddelbart efter behandlingen vil det behandlede hudområde blive hvidt. Efter lidt tid vil huden få sin normale farve igen, og vorten vil være rød.

Indenfor få minutter til flere dage efter behandlingen kan der komme en vabel, i nogle tilfælde blodfyldt. Det er normalt efter frysebehandling og sædvanligvis et tegn på at behandlingen var en succes. Forsøg ikke at stikke hul på vablen. Hvis nødvendigt, kan du dække vablen med en steril bandage. Hvis vablen er åben, desinficer grundigt.

Den behandlede vorte vil langsomt forsvinde efter 10 til 14 dage. Det kan dog tage længere tid for huden at hele fuldstændig.

Hvis vorten findes på fodsålen, kan det gøre ondt at gå på den. For at lindre smerten, kan man anvende et rundt ligtorneplaster.

- Pil ikke i det behandlede område og forsøg ikke at rive vorten af!
- Hold det behandlede område rent og desinficer hvis nødvendigt.
- Man kan bade lige efter behandlingen.

**Er det nødvendigt at gentage behandlingen?**

Vortefri FREEZE er meget effektiv - efter bare få sekunders brug, vil vortens indre være ramt og blive ødelagt på grund af den lave temperatur. Normalt er én behandling nok. For gamle eller store vorter kan det være nødvendigt med mere end en behandling, særligt hvis det er på fodsålen.

Gentag behandlingen, hvis vorten eller dele af vorten ikke er forsvundet efter 14 dage. Hvis en vorte ikke forsvinder efter 3 behandlinger, kontakt din læge.

**Kontakt din læge:**

- hvis du eller dit barn får uventede bivirkninger
- hvis vorten ikke heles
- vorten ikke er forsvundet efter 3 behandlinger.

**3. MULIGE BIVIRKNINGER****Mulige bivirkninger omfatter**

- Vabler rundt om det behandlede område - dette varierer fra tilfælde til tilfælde. Se afsnit 2 "Efter brug af Vortefri FREEZE".

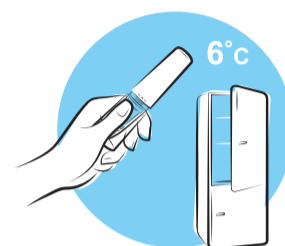
- Brug af Vortefri Freeze kan give en prikkende følelse og huden kan blive øm.
- Huden mister sin farve, kaldet "depigmentering".
- Mindre forbrændinger og ardannelse.
- Risiko for hud-/nerveskade (i tilfælde af overeksponering).

**4. OPBEVARING AF VORTEFRI FREEZE****Før første brug**

- Opbevares tørt og køligt (mellem 5 - 25°C).
- Opbevar ikke i fryser.
- Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Opbevar ikke i en bil, campingvogn eller andre steder der bliver varme. En for høj temperatur vil beskadige beholderen og ødelægge den permanent.
- Holdes væk fra ild og varmekilder.

**Efter hver brug**

- Sæt hættten på efter brug og opbevar i køleskab - det vil give Vortefri FREEZE en længere holdbarhed og øge antallet af doser, der kan anvendes.
- Opbevar ikke i fryser.



- Må ikke udsættes for temperature over 35°C, da det vil aktivere en sikkerhedsmekanisme, som ødelægger beholderen permanent.
- Vent to minutter efter brug, og kasser derefter engangs spidsen og sæt en ny spids i. Vortefri Freeze er nu klar til næste brug.
- Brug kun en fugtig klud, hvis du skal rengøre plastbeholderen

**5. YDERLIGERE INFORMATION****Pakning og udløbsdato**

- En pakning indeholder en Vortefri FREEZE beholder med 7,5 g dinitrogenoxid (flydende), 6 styk engangsspidser og en brugsanvisning.
- Holdbar i køleskab efter første brug: 2 måneder.
- Brug ikke dette produkt efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Bortskaf det tomme produkt efter de lokale regler for bortskaffelse af affald.

**Hvad skal du gøre hvis produktet er tomt eller skadet:**

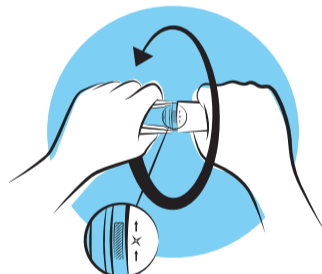
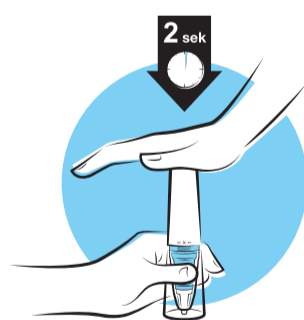
- Hvis du ikke ser rim eller frostrøg efter aktivering (trin 1) er beholderen tom for gas -brug en ny Vortefri FREEZE.
- Hvis der er en konstant susende lyd efter aktivering af produktet og alt gas flyder ud, er beholderen defekt. Forsøg ikke selv at åbne eller reparere produktet, selv ikke hvis du mener at beholderen er tom. Returner produktet til butikken.

**6. SÅDAN ANVENDER DU VORTEFRI FREEZE****KUN FØR FØRSTE BRUG!**

Drej en hel omgang, indtil den sorte stjerne igen er ud for det graverede felt der skal bruges nogle kræfter.

Det gør ikke noget, hvis du drejer stjernen videre forbi det graverede felt.

Vortefri FREEZE er nu aktiveret.

**1**

Placer Vortefri FREEZE på en lige og stabil overflade.

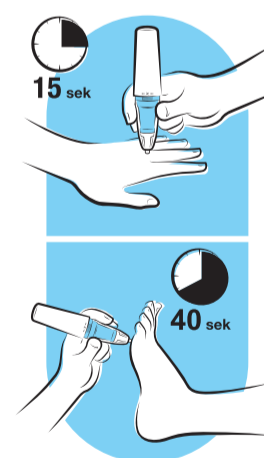
Hold Vortefri FREEZE i en hånd med et fast greb, så den ikke glider.

Tryk beholderen ned med den anden hånd, med tilstrækkelig tryk, i 2 hele sekunder.

**FOR DET BEDSTE RESULTAT ER TIDEN AFGØRENDE.**

**2**

- Fjern hættten
- Du skal se **FROSTRØG**.
- **Anvend produktet straks!**
- Gentag trin, 1 hvis der ikke er frostrøg.

**3**

Pres spidsen af Vortefri FREEZE hårdt mod vorten.

**For det bedste resultat er tiden afgørende.**

**Anvend et ur, eller tæl langsomt højt**

**15 sekunder på hænder, fingrer og arme**

**40 sekunder på fødder**



**Sæt hættten på efter brug**

**FÆRDIG!**

Opbevares i køleskab efter brug.

**6°C**